
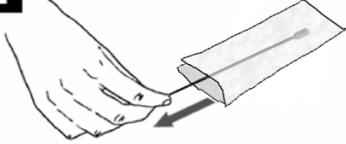



Az Isohelix SK-3S / SK-4S / SK-5S és az MS-02 / MS-03 / MS-04 bukkális törlőkendők használati útmutatója

SK-3S, SK-4S, SK-5S, MS-02, MS-03, MS-04

Bukkális sejtek helyreállítására szolgál. Csak egyszer használatos. **MD CE D**
Szobahőmérsékleten tárolandó. Csak akkor használja, ha a törlőkendő sértetlen marad.
Kövesse a helyes mintavételi eljárást annak elkerülése érdekében, hogy a tamponfej kieszen a szájból.
Ha a tampon feje leesik a tamponról, miközben az a szájában van, azonnal távolítsa el.

<p>Vegyük a DNS-mintát legalább egy órával étkezés, ivás vagy fogmosás után. A legjobb eredmény elérése érdekében öblítse ki a száját vízzel közvetlenül a minta felvétele előtt.</p>	
<p>1</p> 	<p>Nyissa ki a csomagot az egyik végén.</p>
<p>2</p> 	<p>Távolítsa el az összes tampon a csomagolásból, ügyelve arra, hogy ne érintse meg ujjaival a fehér tamponfejet. Megjegyzés: Csomagonként 1 tampon SK-3S és MS-02 készlettel. 2 tampon csomagonként SK-4S és MS-03 készlettel. 3 tampon csomagolásonként SK-5s és MS-04 készlettel.</p>
<p>3</p> 	<p>Helyezze a tampon a szájába, és erősen dörzsölje az arcod belső oldalára, vagy a felső vagy alsó ajak alá. Normál DNS-gyűjtéshez 1 percig súroljon, és legalább 20 másodpercig súroljon. Fontos: Használjon ésszerű, szilárd és szilárd nyomást.</p>
<p>4</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Stabilise*</p> </div>	<p>Ha a tampon 1-2 napnál tovább kell tárolni * a DNS izolálása előtt, stabilizálja az alábbiakkal: i) Kémiai stabilizálás1 vagy ii) Isohelix Dri-kapszulák2 vagy iii) Tárolás -20oC / -80oC vagy iv) Légszárítás</p>

1. megjegyzés: Az Isohelix BFX BuccalFix stabilizációs termékek kínálata a DNS azonnali és teljes stabilizálását kínálja hosszú távú tárolással, legalább 2 évig szobahőmérsékleten, előretöltött csövek vagy ömlesztett csomagolású pufferek tartományában.

2. megjegyzés: Az Isohelix Dri kapszulák alkalmasak SK-3S és MS-02 tamponokkal kombinálva 5 ml-es csővel (külön kapható). A kapszulák vegyi anyagok használata nélkül stabilizálják a DNS-t a tamponon középtávon (legalább 3 év alatt), hatékonyan levegőn szárítva a tampon egy lezárt csőben.

A stabilizálási módszerekről az Isohelix weboldalán olvashat bővebben: www.isohelex.com

* További információ: www.isohelex.com/products/dna-buccal-swab-stabilization/.

A laboratórium vagy a professzionális felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy helyesen ellenőrizze és érvényesítse e szájüreg-DNS törlőkendők használatát a tervezett eszközükhöz vagy folyamatukhoz.